

FAUTEUIL EVASION II


VHP à pousser









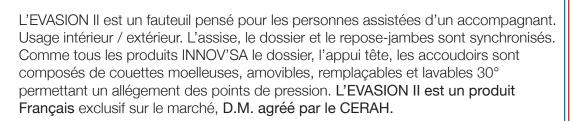

caractéristiques:

hygiène	modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°				
modules de couettes	remplacement aisé en cas d'usure				
composition de la couette	garnie fibre creuse siliconée pour un allégement des points de pression				
assise	composée de mousse HR 35 (Haute Résilience)				
+ produit	Ultra maniable, dispose d'une large barre de poussée qui permet à l'aidant de manier le fauteuil avec facilité				
positions	inclinaison manuelle : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés.				
sécurité	Normes non-feu revêtement PVC/PU: M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés: 1021-1 – 1021-2 et biocompatible. Velours galène: 1021.1 uniquement				
revêtements	velours déperlant, PVC/PU, tissus chinés				
largeurs d'assise	38, 44, 50, 56 & 65 cm				
hauteur sol / assise	48 cm				
largeur hors tout	66 cm (T4), 67 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)				
options disponibles	câle-tête fabrication spéciale, appareil de soutien partiel de la tête, cale- tronc ajustable, harnais, assise Classe II, tablette ventrale				
poids maximum utili- sateur	130 kg				
poids du fauteuil	37,5 kg				
garanties	fauteuil 2 ans - vérin 5 ans				
franco à l'unité	oui				
fabrication	France - région grand Est- Aube				









FAUTEUIL EVASION II

dimensions en cm

largeurs	profondeurs	largeurs	hauteur	hauteur	poids du	poids maxi
d'assise	d'assise	hors-tout	d'assise	hors-tout	fauteuil	utilisateur
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	670 mm 670 mm 730 mm 790 mm 880 mm	520 mm	1350 mm	37,5 kg	130 kg

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg



double palette repose-pieds rabattable



freins à tambour à commande manuelle

aide à l'entretien

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers. Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

LES COLORIS



PVC / PU imperméable non-feu M2 🔥

1- ebène

2- cacao

3- framboise







velours déperlant non-feu EN 1021.1 & 1021.2

4 - choco édition 5 - black édition

6 - galène (1021.1 uniquement)



8 - marron chiné

LES OPTIONS

câle-tête fabrication spéciale



appareil de soutien partiel de la tête



cale-tronc ajustable



harnais



assise Classe II



tablette ventrale



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE

FABRICATION FRANÇAISE